




Reparaturanleitung BIOSTAR® 4-Aligner

8 Anleitung Am Schutzsieb
klebende Folien entfernen

Anleitung Am Schutzsieb klebende Folien entfernen


1 TRENNEN SIE DAS GERÄT VOM STROMNETZ!

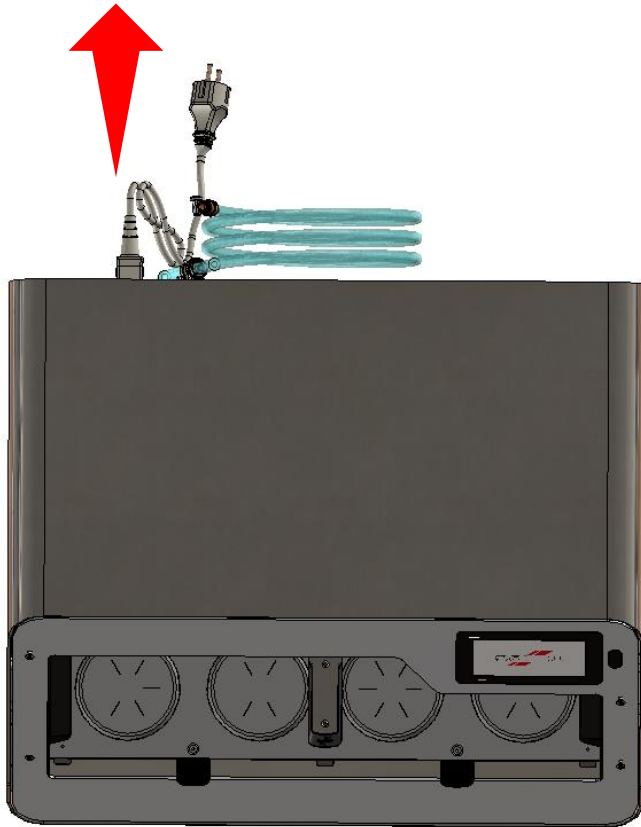

2 Drehen Sie das Gerät um, so dass die Rückseite des Gerätes frei zugänglich ist.



Bitte NICHT das Gerät dabei an der FRONTBLENDE anheben, sondern greifen Sie unter das Gerät!!

Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Software-Version installiert ist.

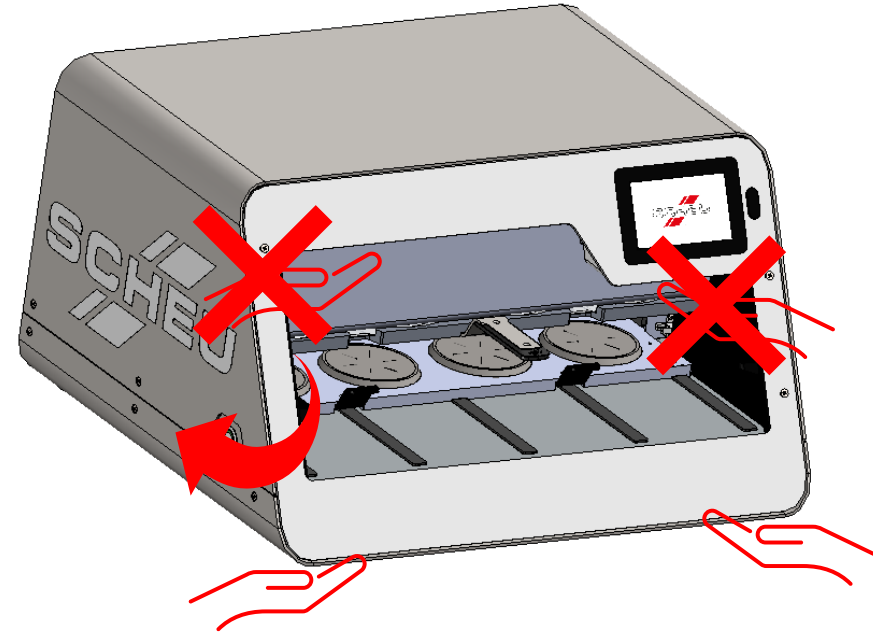


Anleitung Am Schutzsieb klebende Folien entfernen

- 3** Lösen Sie die 6 Schrauben der Rückwand und legen Sie die Rückwand zur Seite.
- 4** Ziehen Sie die Grundplatte mit dem Strahler bis zum Endanschlag zurück.

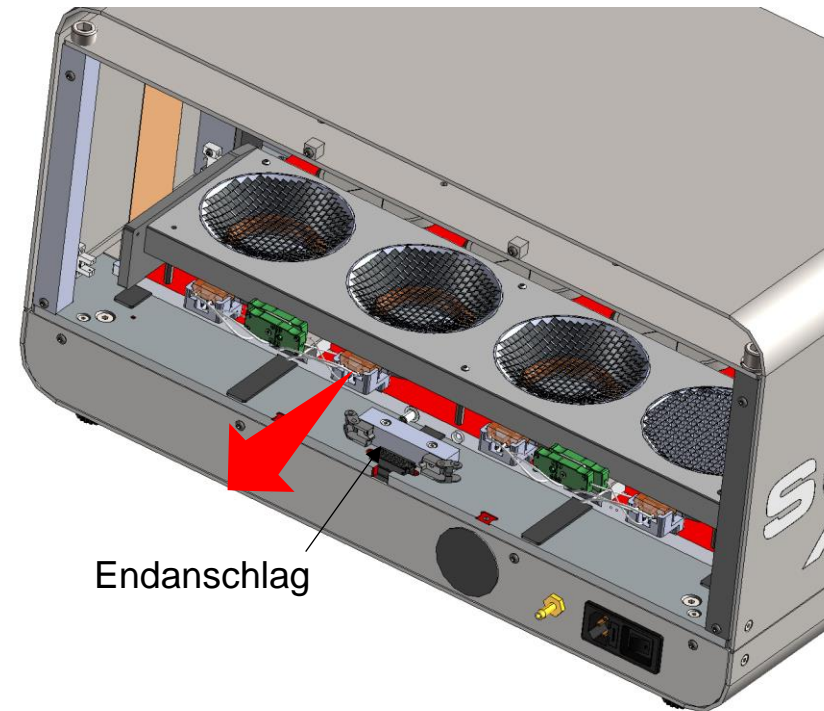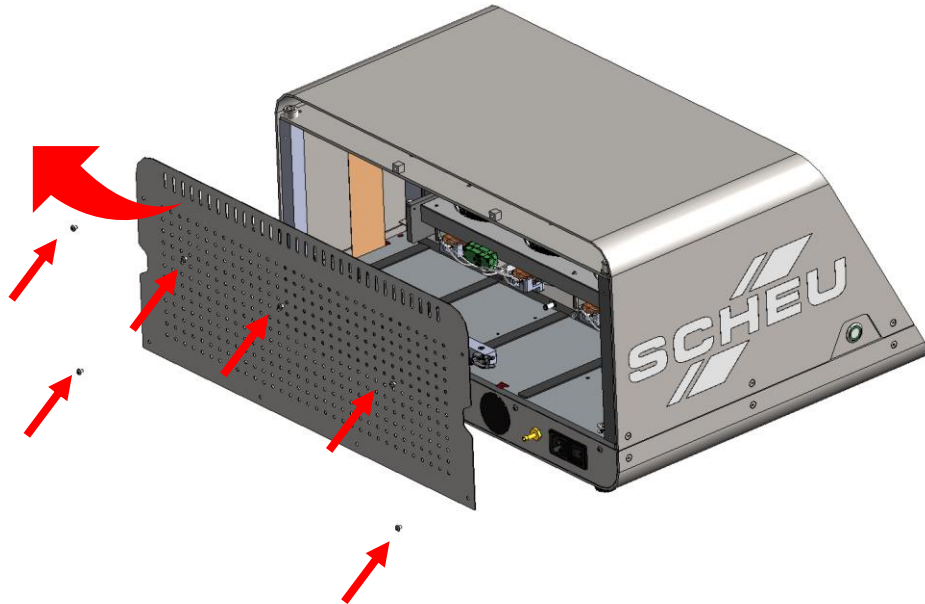


Anleitung Am Schutzsieb klebende Folien entfernen

- 5** Lösen Sie die 6 Schrauben des Strahlerschutzsiebes und nehmen Sie es heraus.


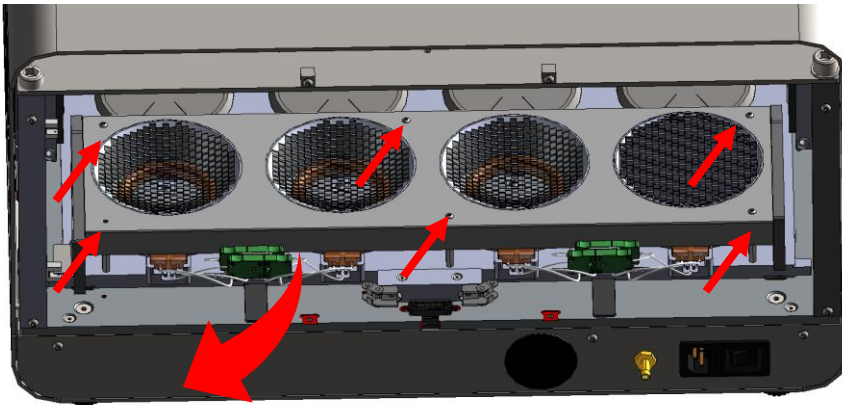


- 6** Befreien Sie das Schutzsieb von den Kunststoffresten.
TIPP! Erwärmen Sie das Netzgitter an der betroffenen Stelle mit dem Heißluftföhn und kratzen Sie es mit einem Instrument ab.

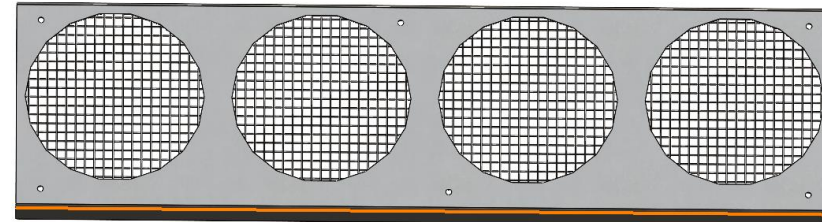

Anleitung Am Schutzsieb klebende Folien entfernen

- 7** Bringen Sie das Schutzsieb für den Strahler an und schrauben Sie die Rückwand fest. Achten Sie darauf, dass beim Einsetzen des Schutzsiebes die lange Seite zur Rückwand zeigt.
- 8** Führen Sie im Softwareprogramm den Strahlertest durch, um zu überprüfen, ob die Montage erfolgreich durchgeführt worden ist (siehe Seite 2).

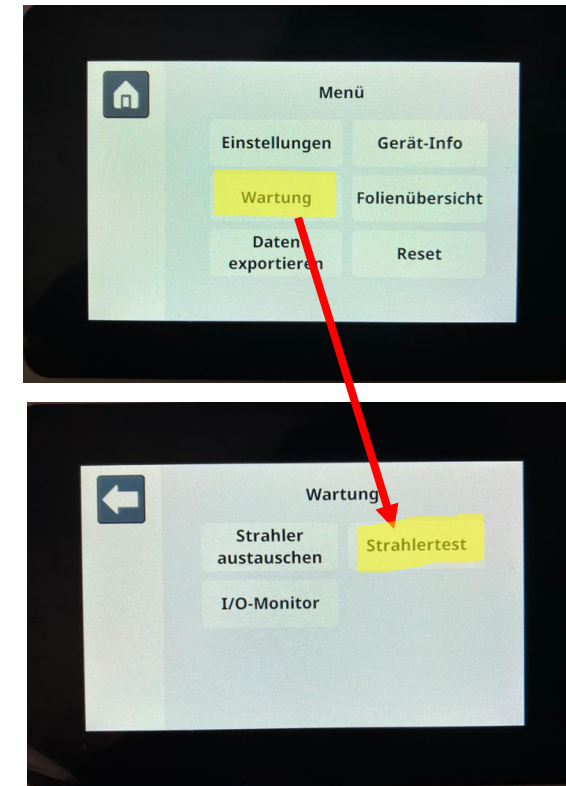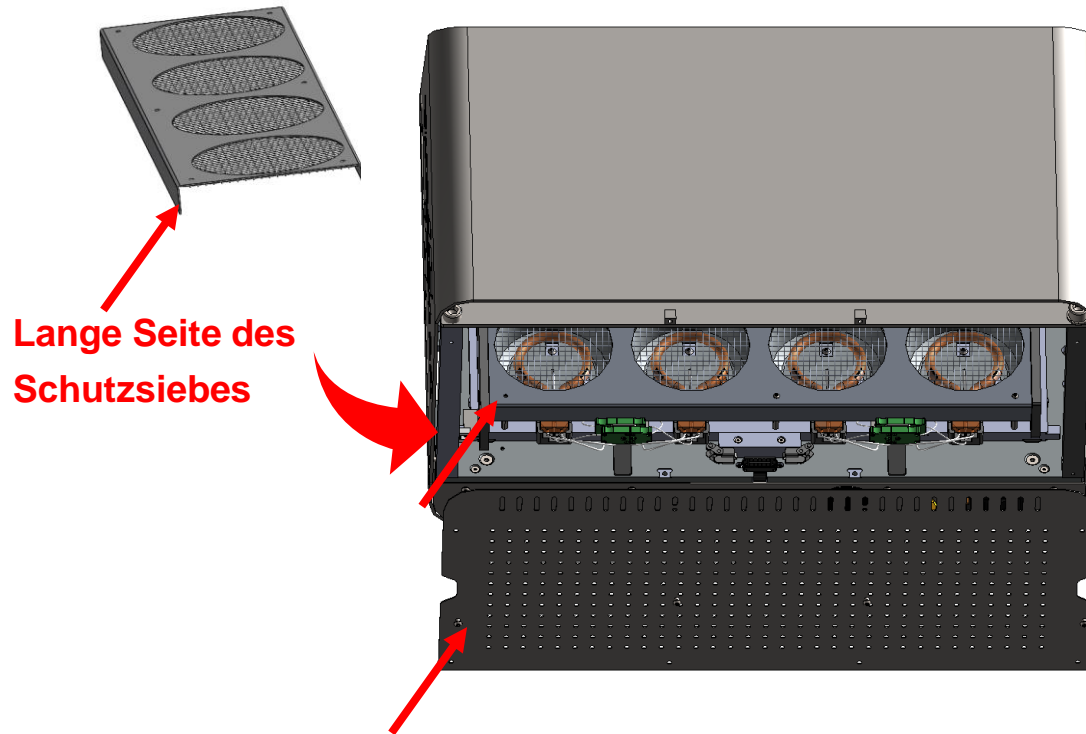

SCHEU		Allgemein technisch nach ISO 1502		Material 1.5			
				Werkstoff			
		Datum	Name	Zusammenfügen der BG			
		DWG: 11.02.2022					
		Erst					
		Nach					
				BIOSTAR 4-Aligner			
Oberflächenanlege nach DIN ISO 1302 Reihe 2				3030_832_V1			
Blatt	Änderung	Datum	Name	8102_DWG0001_BiostarV1.dwg\BiosstarV1.dwg\BiosstarV1.dwg			Blatt 1 von 1
							A3