

# Instrumente zur Ausarbeitung

Die Alleskönner mit der längeren Ausdauer.

## BIOPERM-Trimmer / POLYFIX

Beschleifen und Vorpulieren von weichelastischen Folien und Verbundfolien.

## OSAMU-Polierer

Endbearbeitung und Politur von weichelastischen Folien und Verbundfolien.

### Lieferprogramm

// BIOPERM-Trimmer, blau	2 Stück	3226
// POLYFIX auf Mandrell, braun	1 Stück	3371
// POLYFIX ohne Mandrell, braun	6 Stück	3372
// OSAMU-Polierer, grau	2 Stück	3247



## DIMO®

Die weichen, elastischen Scheiben mit der offenen Faserstruktur sind perfekt zur professionellen Bearbeitung von Tiefziehfolien, harten und weichen Kunststoffmaterialien, Metallen und ideal zum Schleifen und Glätten von Silikonen, Polyurethanen und anderen weichbleibenden Werkstoffen. Das optimierte Material, minimiertes Ausfasern und die geringe thermische Entwicklung sorgen für eine vielfach höhere Lebensdauer.

### Anwendung

Bearbeitung und Vorpulitur von Elastomeren, Sandwich-Folien, Sportmundschutz- und KFO-Geräten.

### Lieferprogramm

// DIMO® braun, grob	10/50 Stück	3382
// DIMO® grün, mittel	10/50 Stück	3383
// DIMO® maron, fein	10/50 Stück	3384
// DIMO® Mandrell	10 Stück	3380



## DIMO®PRO / DIMO®PRO SLIM

Die Kombination aus spezieller Elastomermischung und feiner Faserstruktur macht DIMO®PRO besonders vielseitig. Mit unterschiedlichen Drehzahlen können Sie gleichermaßen perfekt abtragen, abrunden und auch polieren.

### Anwendung

**DIMO®PRO:** Zur Ausarbeitung der großflächigen Randbereiche und zur End- und Hochglanzpolitur von Schienen, Positionern, Sportmundschutz- und KFO-Geräten. Sorgt für hochglänzende Ränder und Übergänge bei der Verwendung von hart/weichen Verbundfolien.


**DIMO®PRO SLIM:** Zum Rand verjüngt, für die Feinausarbeitung von Schienen, insbesondere für die Aussparungen im Bereich der Bänder und Interdentalräume.

### Lieferprogramm

// DIMO®PRO Scheibe 24 x 6 mm	10/50 Stück	3381
// DIMO®PRO SLIM Scheibe 24 x 6 mm	10/50 Stück	3376

## Finier-Set

Sortiment mit acht Schleifkörpern zum Trennen, Ausarbeiten und Finieren von weich- und hartelastischen Folien..  
Mit Farbcodierung zur einfachen Zuordnung.

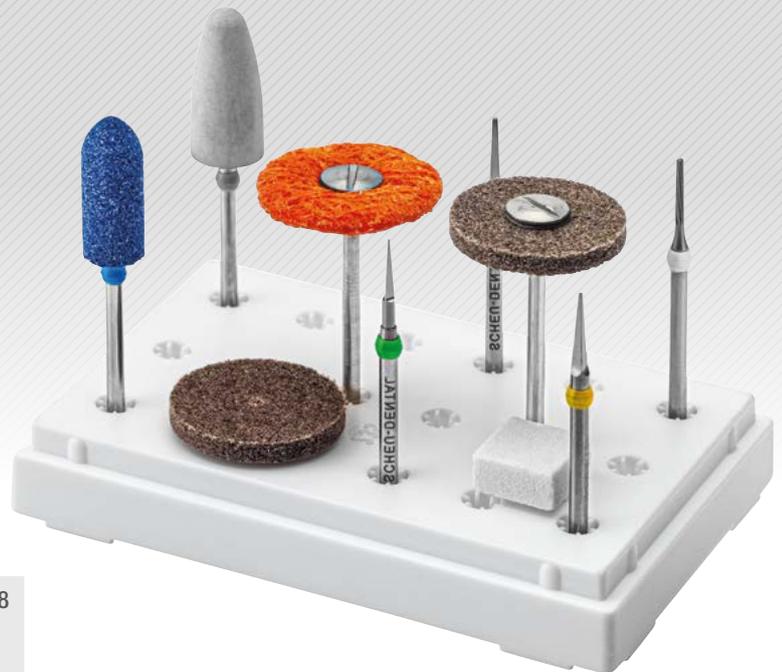

### // Finier-Set

1 Stück

3378

inkl. je 1 Trennfräser, Finierfräser,  
HM-Schneidfräser, HM-Tricutter fein,  
BIOPERM-Trimmer, POLYFIX, OSAMU-  
Polierer, DIMO®PRO SLIM und Zurichtstein



## Trennfräser

Spiralfräser zum schnellen und sauberen Trennen und Schneiden aller harten Tiefziehmaterialien.

## HM-Schneidfräser

Dreikantfräser aus Hartmetall zum schnellen und sauberen Trennen und Schneiden aller harten Tiefziehmaterialien.

## HM-Tricutter fein

Graziler Dreikantfräser zur interdentalen Ausarbeitung von Schienen.

## Finierfräser

Vierkantfräser aus weicher Speziallegierung, der Klammerdrähte nicht beschädigt.

## Lieferprogramm

// Trennfräser	6 Stück	3214
// HM-Schneidfräser, gelb	6 Stück	3369
// HM-Tricutter fein, grün	6 Stück	3370
// Finierfräser, rot	6 Stück	5262

