


Aligner Family

Vielfalt, die bewegt – Kontrolle, die überzeugt:
Für jede Behandlung die passende Folie.



Zuverlässigkeit

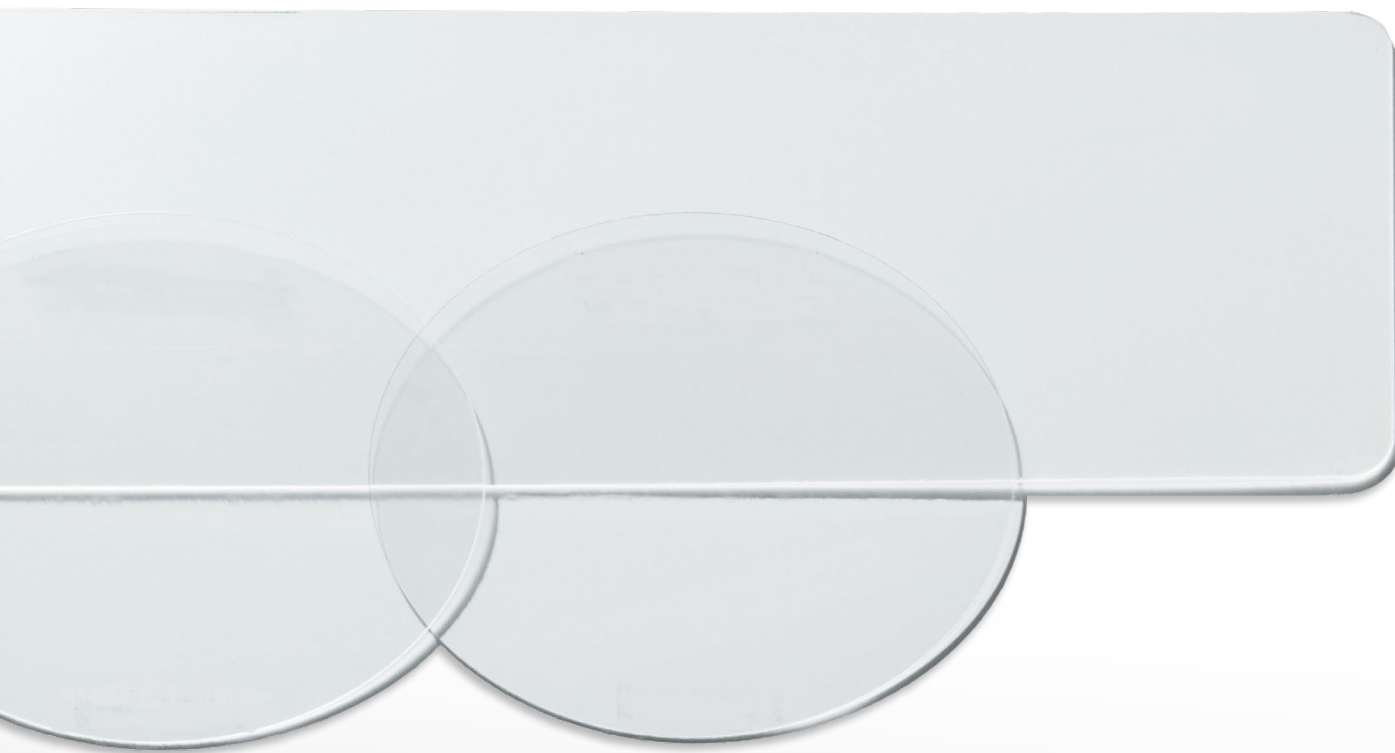

Sicherheit



Kontrolle



Stabilität



In nur 3 Schritten zur idealen Alignerbehandlung.

Mit der Aligner Family von SCHEU-DENTAL legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Alignerbehandlung – Schritt für Schritt.



Schritt 1: Attachments

Kleine, zahnfarbene Befestigungen auf den Zähnen, die den Aligner sicher fixieren und gezielte Kraftübertragung ermöglichen. So lassen sich auch komplexe Zahnbewegungen präzise steuern. Das Setzen von Attachments erfolgt je nach individuellem Patientenfall und stellt einen optionalen, aber wirkungsvollen Behandlungsschritt dar.



Schritt 2: Aligner

Ob als 1-Schienen-System oder als 3-Schienen-System, unsere innovativen Folien erfüllen höchste Ansprüche in der modernen Alignertherapie und sorgen für effiziente Abläufe sowie exzellente Behandlungsergebnisse.



Schritt 3: Retainer

Unsere Retentionsfolien sichern den Therapieerfolg langfristig, indem sie die Zähne zuverlässig in ihrer neuen Position stabilisieren.

Die Aligner Family begleitet Sie und Ihre Patienten somit vom ersten Behandlungsschritt bis zur nachhaltigen Sicherung des Ergebnisses – für maximale Effizienz, verlässliche Resultate und höchste Zufriedenheit.



Schritt 1: Attachments

Videotipp

qr.scheu-dental.com/?c=ndY



Der zusätzliche Halt für präzise Zahnbewegungen

Um die volle Wirkung der Alignerbehandlung zu entfalten, braucht es zunächst einen sicheren Halt: Attachments. Diese kleinen, zahnfarbenen Befestigungen verbinden den Aligner optimal mit den Zähnen und ermöglichen eine gezielte Kraftübertragung – selbst bei komplexen Fällen.

Unsere Folienempfehlung:

COPYPLAST® Attachments präzise und zuverlässig anwenden.

- /// Zähelastische Folien, die sich nicht mit Autopolymerisat verbinden
- /// Hochwertige Tiefziehfolie für Schienen und Transfermasken
- /// Präzise Formgebung für Attachments
- /// Einfach zu verarbeiten, robust und formstabil

→ Für effiziente Herstellung und exakte Positionierung der Attachments





Schritt 2: Aligner

Videotipp

qr.scheu-dental.com/?c=md7



Vierfach stark: unsere Alignerfolien für jeden Fall

Der nächste Schritt ist die aktive Korrektur. Hier sorgen unsere Alignerfolien für höchste Präzision und Effizienz. Ob als 1-Schienen-System oder als 3-Schienen-System, für umfassende Behandlungen oder leichte Korrekturen: mit unseren innovativen Materialien haben Sie die passende Lösung für jeden Fall.

1-Schienen-System

Unsere Folienempfehlungen:



UNIQ pd

Eine Schicht. Maximale Wirkung.
Die neue Generation des Alignerkomforts.

- /// Sanfte Initialkräfte, konstante Rückstellkraft
- /// Hoher Tragekomfort über längere Tragezeiten
- /// Recyclbares Copolyester, BPA-frei
- /// Vorgetrocknet und einzeln vakuumverpackt

→ Empfohlen für anspruchsvolle Fälle
mit konstantem, schonendem Krafteinsatz



DURAN®

Klar in der Sache. Stark in der Anwendung.
Die Folie für vielseitige Einsatzfälle.

- /// Hartelastisch mit hoher Initialkraft
- /// Glasklar, nur leicht hygroskopisch
- /// Wirtschaftlich, recycelbar, PETG-basiert

→ Die zuverlässige Wahl für Standard-
behandlungen und den Einstieg



CA® Pro

Sanfter Start. Konstante Kraft.
Für die schonende Alignertherapie.

- /// Dreischichtfolie mit elastischem Kern
- /// Niedrige Anfangskraft, konstant moderate Wirkung
- /// Flexibel, bruchstark, besonders komfortabel
- /// Vorgetrocknet und einzeln vakuumverpackt

→ Ideal für den sanften Therapiebeginn

3-Schienen-System

Unsere Folienempfehlung:



CA® Folie

Perfekt im CA® Clear Aligner System.
Für jede Umstellung die richtige Stärke.

- /// Präzise Ergebnisse durch bewährtes CA® System
- /// Transparent, hartelastisch, formstabil
- /// Mit Markierung für eine einfache Zuordnung und Anwendung

→ Für effiziente Workflows und maximale
Kontrolle im CA® Clear Aligner System



Schritt 3: Retainer

Videotipp

qr.scheu-dental.com/?c=mXJ



Stabilität für dauerhafte Ergebnisse

Nach der aktiven Behandlung folgt der wichtigste Schritt: die Sicherung des Therapieerfolgs. Retentionsfolien verhindern, dass sich die Zähne zurück in ihre ursprüngliche Position bewegen und sorgen für eine langfristige Stabilisierung.



Unsere Folienempfehlungen:

IMPRELON® S pd

Die starke Grundlage für langfristigen Halt.

- Extrem bruch- und abrasionsfest
- Individuelle Retentionsschiene, auch für die Herstellung des OSAMU-Retainer
- Einfache Handhabung und schnelle Tiefziehbarkeit
- Vorgetrocknet und einzeln vakuumverpackt

→ Garantiert zuverlässige Retention und langfristige Stabilisierung

CA® Retentionsfolie pd

Der ideale Abschluss nach der Behandlung mit dem CA® Clear Aligner System.

- Hochwertiges Tiefziehmaterial
- Einfache Modellintegration mit ISOFOLAN®
- Leicht auszuarbeiten, ideal für feine Konturen und Interdentalräume
- Vorgetrocknet und einzeln vakuumverpackt

→ Sichert das Therapieergebnis schonend und zuverlässig.



Attachments



Allgemeine Infos	COPYPLAST®
Empfohlene Folienstärken für die Alignertherapie (in mm)	COPYPLAST®:
0,5	3177
0,75	3169
1,0	3179
Chemische Bestandteile	Polyethylen niedriger Dichte (PE-LD)

Aligner




Allgemeine Infos		UNIQ pd		DURAN®			CA® Pro			CA® Folie	
Stärken (in mm)	UNIQ pd:	UNIQ+ pd:	UNIQ+ pd Strips:	DURAN®:	DURAN®+:	DURAN®+ Strips:	CA® Pro:	CA® Pro+:	CA® Pro+ Strips:	CA® Folie:	CA® Folie+ Strips:
0,4				3470	3472					3441	3441.9
0,5	3647	3651	3657	3411	3426	3482	3640	3644	3488	3405	3405.9
0,625	3648	3652	3658	3412	3428	3483	3641	3645	3489	3406	3406.9
0,75	3649	3653	3659	3413	3430	3484	3642	3646	3490	3407	3407.9
1,0				3415	3432	3485					
Empfohlene Folienstärken für die Alignertherapie (in mm)	0,625			0,4 – 1,0			0,75			0,5 (soft) 0,625 (medium) 0,75 (hard)	
Chemische Bestandteile	Copolyester			PETG			Copolyester und Elastomer			PETG	
Aufbau	Monofolie			Monofolie			Dreischichtfolie			Monofolie	
Kraftübertragung											
Inititalkraft	mittel			hoch			niedrig			hoch	
Kraftübertragung	konstant hoch			schnell & stark			konstant moderat			schnell & stark	
Endkraft	hoch			niedrig			mittel			niedrig	

Zur Isolierung empfehlen wir unsere ISOFOLAN® Folie. Die „+“-Varianten sind bereits mit einer verarbeitbaren Isolierfolie (Material: Polyethylen niedriger Dichte = LDPE) ausgestattet. Die CA® Folie ist nur als Strip in der „+“-Variante erhältlich.

Retainer



Allgemeine Infos	IMPRELON® S pd			CA® Retentionsfolie
Empfohlene Folienstärken für die Alignertherapie (in mm)	IMPRELON® S pd:	IMPRELON® S+ pd:	IMPRELON® S+ pd Strips:	CA® Retentionsfolie pd:
0,75	3322	3331	3335	3438
1,0	3324	3332	3336	3440
Chemische Bestandteile	Copolyester			PETG

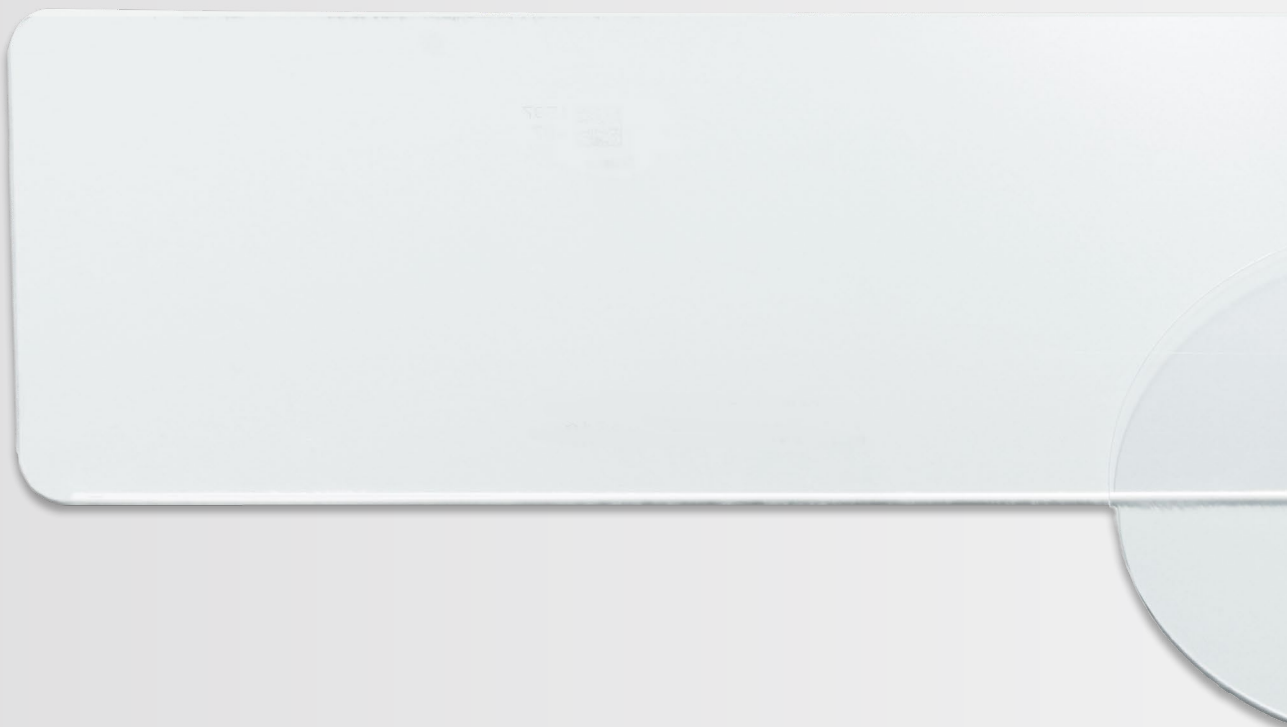

Jetzt die passende Folie entdecken!

Erleben Sie die Vielfalt der Aligner Family und entdecken Sie weitere Folien aus unserem Sortiment. Mit SCHEU-DENTAL erhalten Sie die richtige Folie für jede Anwendung.

Lassen Sie sich gerne von unserem erfahrenen Team telefonisch beraten oder vereinbaren Sie direkt einen Termin mit unserem Außendienst: www.scheu-dental.com/kontakt



DE 300/01/26 G REF PM5453.01

